

MAFF2 – FFP2 NR

Istruzioni per l'uso di maschere respiratorie monouso senza valvola espiratrice FFP2 NR:

MASCHERA RESPIRATORIA FFP2 NR

Semimaschera filtrante di classe di efficienza FFP2 NR

Marca: F-MASK - Modello: MAFF2

Riferimento:

- MAFF2-2020-4P (dimensione 245 mm, SME, SF, SI)

- MAFF2-2021-4P (misura 225 mm, SME, SF, SI)

Organismo notificato: APAVE SUDEUROPE SAS

Organismo notificato coinvolto nell'esame UE del tipo modulo (B) e nel controllo annuale della qualità del modulo (C2) ai sensi del regolamento 2016/425/UE.

APAVE SUDEUROPE SAS

CS60193 – 13332 Marseille Cedex 16 – France



Questa maschera è conforme ai requisiti definiti da:

- Regolamento Europeo: 2016/425 e 2017/745

Questa maschera è stata valutata secondo le norme:

EN149 : 2021+A1 : 2009	EN14683 + AC : 2019
-------------------------------	----------------------------

Data della prima apposizione della marcatura CE: 16/08/2021

Nota: Gli standard e i risultati dei nostri test possono essere scaricati dal nostro sito, www.Prism-medical-protect.fr, registrandosi facendo clic sulla scheda «Connessione».

Tenuto conto delle indicazioni di conformità e di valutazione la maschera FFP2 NR sono DPI (dispositivi di protezione individuale) utilizzabili nell'ambiente dell'industria.

La maschera è anche un DM (dispositivo medico) di classe I, utilizzabile in ambiente ospedaliero, operatori sanitari, pazienti e visitatori degli ambienti ospedalieri.

TIPOLOGIA:

Semimaschera filtrante di classe di efficacia FFP2 NR, di tipo «becco d'anatra», maschera monouso, non sterile, non riutilizzabile.

PREVISIONI

Esso è destinato a proteggere chi lo indossa dall'inhalazione sia di goccioline che di particelle in sospensione nell'aria.

Questa maschera è utilizzato per proteggere il suo portatore di polvere, e aerosol (goccioline sottili in sospensione nell'aria).

CONSIGLI PER L'USO:

Maschera monouso, non riutilizzabile, della durata massima di 8 ore.

Chiudere la scatola dopo l'uso.

Maschera da gettare dopo l'uso in un apposito cestino e non in natura.

In caso di patologia respiratoria, problema dermatologico e allergico, in caso di disturbo psichiatrico, persona con disturbo autistico e qualsiasi altro effetto indesiderato, consultare un medico.

PRIMA DELL'USO:

Controllare bene la scatola prima della sua apertura.

Verificare l'assenza di umidità o muffa.

Verificare l'assenza di schiacciamento della scatola.

In caso di dubbio cambia unità o scatola.

Leggere le istruzioni e chiedere consiglio a un professionista sanitario

AVVERTENZE:

- La mezza maschera non è progettata per proteggere chi la indossa dai gas.
- La maschera non può essere utilizzata in atmosfera esplosiva.
- È improbabile che i requisiti di tenuta della maschera siano soddisfatti, se i peli del viso passano sotto il giunto facciale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Prodotto contenente componenti non tessuti, da utilizzare con cautela per le persone allergiche.
- In situazioni di lavoro intensivo l'uso della maschera è consigliato per una durata di 15 minuti.
- La mezza maschera non deve essere utilizzata in atmosfere a rischio di carenza di ossigeno.
- Se la maschera è danneggiato o la resistenza respiratoria è più difficile cambiare la maschera.



La dichiarazione di conformità CE e la scheda tecnica sono scaricabili da

www.prism-medical-protect.fr

o via e-mail: qualite@prism-medical-protect.fr

Per qualsiasi reclamo questa deve essere inviata per posta, precisando il numero di lotto e il numero della maschera:


ISTRUZIONI PER L'USO:




1 Separare i bordi della maschera per aprirla completamente.




2 Piegarla la barretta nasale per mantenere il maschera respiratoria aperta.

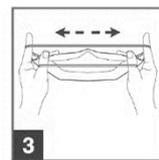


3 Separare ciascuno dei legami elastici con indici e polli.

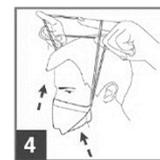

4 Incastrare la maschera formata sotto il mento e passare gli elastici sopra della testa tenendoli con il pollice e l'indice

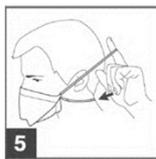

5 Rilasciare l'elastico interno e posizionarlo nella parte inferiore del collo

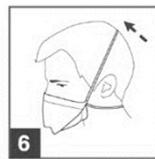

6 Posizionare l'elastico 2 nella parte superiore del cranio



7 Regolare la barretta nasale premendo ben al livello delle ali del naso con le dita



8 Posizionare la maschera fino a quando aderisce perfettamente al viso

REGOLAZIONE E CONTROLLO DI TENUTA:

La tenuta della maschera deve essere controllata prima dell'uso:

Per verificare la tenuta della maschera:

- Mettiti la maschera e basta,
- Regolare il filo per il naso,
- Soffiare con la bocca in modo che la maschera si gonfia,
- Se l'aria esce a livello del naso, regolare il filo pizzico naso,
- Se l'aria esce ancora dopo aver regolato la pinza, cambiare la maschera.

CONDIZIONI NORMALI DI CONSERVAZIONE E DI MAGAZZINAGGIO:



- Non conservare al sole
- Conservare al riparo dai raggi UV



- Conservare in luogo protetto
- Conservare ad una temperatura compresa tra 5°C e 40 °C
- Non conservare in luogo umido e al riparo dalle intemperie
- Conservare in un locale asciutto con umidità inferiore al 60
- Non bagnare la maschera prima dell'uso



Le condizioni di magazzino devono essere verificate regolarmente.

INFORMAZIONI VARIE



Non riutilizzabile



Non contiene lattice



Prodotto non sterile



Data di fabbricazione



Data limite di utilizzazione



numero di lotto



Numero di riferimento della maschera



dispositivo medico



Identificazione unica dei dispositivi



Nome delle composizioni materie

Ci sostengono, e sono membri delle seguenti organizzazioni,



Prodotto europeo prodotto in Francia



Proteggere l'ambiente gettando la maschera usata in un cestino

In caso di incidente grave in relazione a questo dispositivo si prega di notificare l'incidente al fabbricante e all'ANSM (www.ansm.sante.fr)